



LIQUEEBACT

SUPERABSORBIERENDER AKTIVKOHLEVERBAND

25


2025 / 01

LIQUEEBACT

Superabsorbierender Aktivkohleverband

LIQUEEBACT ist ein mehrlagiger Wundverband mit integriertem Aktivkohlevlies, indiziert zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden, chronischen, akuten und/oder übelriechenden Wunden. Die superabsorbierende Schicht (Kern aus superabsorbierendem Polymer [SAP]) verfügt über hervorragende Saug- und Retentionseigenschaften, nimmt Wundflüssigkeit schnell auf und schließt diese sicher ein.

Die antimikrobiell wirkende Aktivkohleschicht bindet Bakterien und Keime durch ein physikalisches Prinzip, ohne die Abgabe von Wirkstoffen. Eine reduzierte Keimlast in der Wunde sorgt für einen besseren Heilungsverlauf, minimiert zusätzlich üble Wundgerüche und kann die Lebensqualität Ihres Patienten steigern.

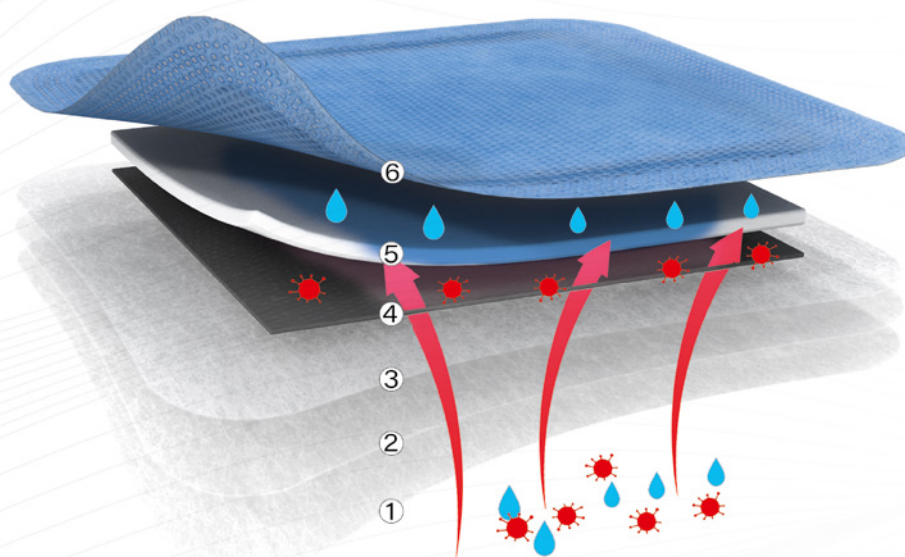

Funktionsprinzip des mehrschichtigen Aufbaus

Die hydrophilen Wundkontaktsschichten [1][2] leiten die Wundflüssigkeit nach oben in die Verteilungsschicht [3], die das Exsudat schnell und gleichmäßig aufnimmt und nach oben in die absorbierende Schicht [5] transportiert. Die, vor dem superabsorbierenden Kern [5] befindliche, antimikrobiell wirkende Aktivkohleschicht [4] bindet Bakterien, Keime und Gerüche, bevor der SAP-Kern [5] das Exsudat aufnimmt und sicher einschließt. Die flüssigkeitsabweisende Wäscheschutzschicht [6] mit ihren dampfdurchlässigen Eigenschaften verhindert, bzw. minimiert das Durchschlagen von Exsudat, die Atmungsaktivität wird verbessert und somit die Fähigkeit des Exsudatmanagements gesteigert.

Leistungen

- ✓ schnelle und starke Aufnahme aller Exsudationsgrade
- ✓ effektive Geruchs- und Keimbindung
- ✓ weich und anschmiegsam
- ✓ Wäscheschutzschicht minimiert und verhindert Flüssigkeitsdurchschlag

Exsudatmenge (E)

kein /gering

mäßig



stark



sehr stark



Wundphase (P)

feuchte Nekrose



Fibrinbelag



Granulation



Epithelisierung



Infektion



Wundtiefe (W)

flach



tief



Kavität




LIQUEEBACT

Superabsorbierender Aktivkohleverband

LIQUEEBACT ist indiziert zur Behandlung für mäßige bis starke Exsudation und kann bei chronischen, akuten und übelriechenden Wunden angewendet werden, wie z.B. Druckgeschwüren, venösen und arteriellen Beingeschwüren, diabetischen Geschwüren, diabetischen Fußgeschwüren, exulzierenden Tumoren, Karzinomen, Transplantationsstellen, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Schürf- und Risswunden.

LIQUEEBACT kann auch unter Kompressionsverbänden angewendet werden.

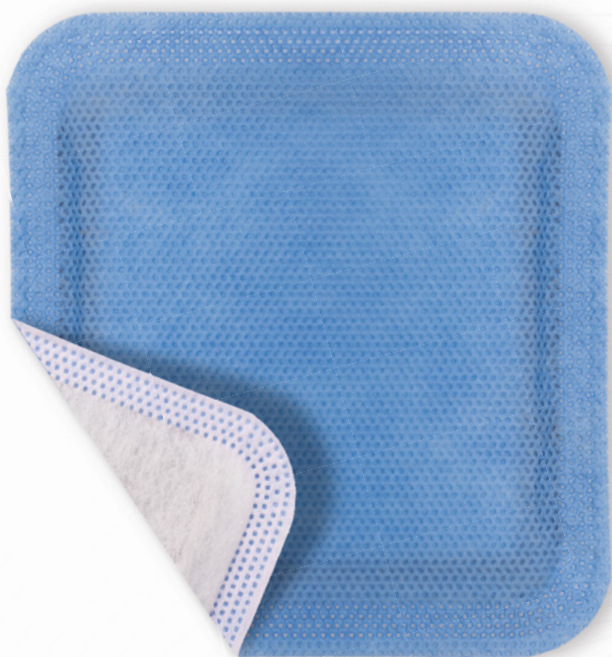

Leistungen

- ✓ schnelle und starke Aufnahme aller Exsudationsgrade
- ✓ effektive Geruchs- und Keimbindung
- ✓ weich und anschmiegsam
- ✓ Wäscheschutzschicht minimiert und verhindert Flüssigkeitsdurchschlag

Indikationen

- ✓ Chronische und akute Wunden
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Venöse und arterielle Beingeschwüre
- ✓ Diabetische Geschwüre
- ✓ Diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Exulzierende Tumore
- ✓ Karzinome
- ✓ Transplantationsstellen
- ✓ Verbrennungen 1. und 2. Grades
- ✓ Schürf- und Risswunden

	Größe Wundauflage	Zusatzinformation	VE	PZN	REF
M	10 cm x 10 cm	medium	1 x 10	5919529	LQB-1010
L	10 cm x 20 cm	large	1 x 10	5919535	LQB-1020
XL	20 cm x 20 cm	extra large	1 x 10	5919541	LQB-2020

Logistikpartner Österreich
Publicare plus GmbH
An der Trauner Kreuzung 1
4061 Pasching
Telefon 07229 / 63 902
E-Mail info@publicare-plus.at



Vertrieb durch:
LF Medizinprodukte GmbH
Buchau 3
8933 Oberreith
Telefon 03632 / 61 690
E-Mail info@lf-med.de