

LIQUEEMAX®
SUPERABSORBIERENDER SILIKON-VERBAND

26
2026 / 01

LIQUEEMAX®

Anpassbarer, extra weicher Superabsorber für jede Körperkontur

LIQUEEMAX® ist ein mehrlagiger, besonders weicher Superabsorber mit hoher Saug- und Bindekapazität für mäßig bis stark exsudierende, akute und chronische Wunden. Der superabsorbierende Kern nimmt Wundflüssigkeit schnell auf und hält sie sicher im Verband - selbst unter Druck.

Dank seines flexiblen Aufbaus lässt sich LIQUEEMAX® ohne Hilfsmittel an unterschiedliche Wundsituationen (plan, konvex oder konkav) anpassen. Die integrierte Silikon-Netz-Wundkontaktschicht sorgt für ein sanftes, atraumatisches Ablösen und einen zuverlässigen Halt auf der Haut.




Funktionsprinzip des mehrschichtigen Aufbaus

Die haftende Wundkontaktschicht (1) sorgt für eine sanfte, atraumatische Auflage auf der Wunde und schützt die fragile Haut. Die Ableitungsschicht [2] wirkt wie ein Löschblatt: Sie nimmt Wundexsudat schnell auf und verteilt es gleichmäßig über die gesamte Fläche des Verbandes. Dadurch wird der absorbierende Kern gleichmäßig aktiviert und kann seine maximale Saugkapazität entfalten. Der absorbierende Kern [3], der ein superabsorbierendes Polymer (SAP) enthält, bindet große Mengen Exsudat sicher und verhindert ein Zurückfließen oder Austreten von Flüssigkeit. Die flüssigkeitsabweisende Außenschicht [4] verhindert, dass Exsudat nach außen durchschlägt.

LIQUEEMAX®

Patentiertes Design für einfache Handhabung

LIQUEEMAX® ist einzigartig sowohl im Design als auch in der Handhabung und vereint zahlreiche einzelne Wundverbandgrößen und Sonderformen in einer einzigen Wundaufgabe. Besonders bei herausfordernden Wundlokalisationen kann LIQUEEMAX® seine Stärken auspielen.

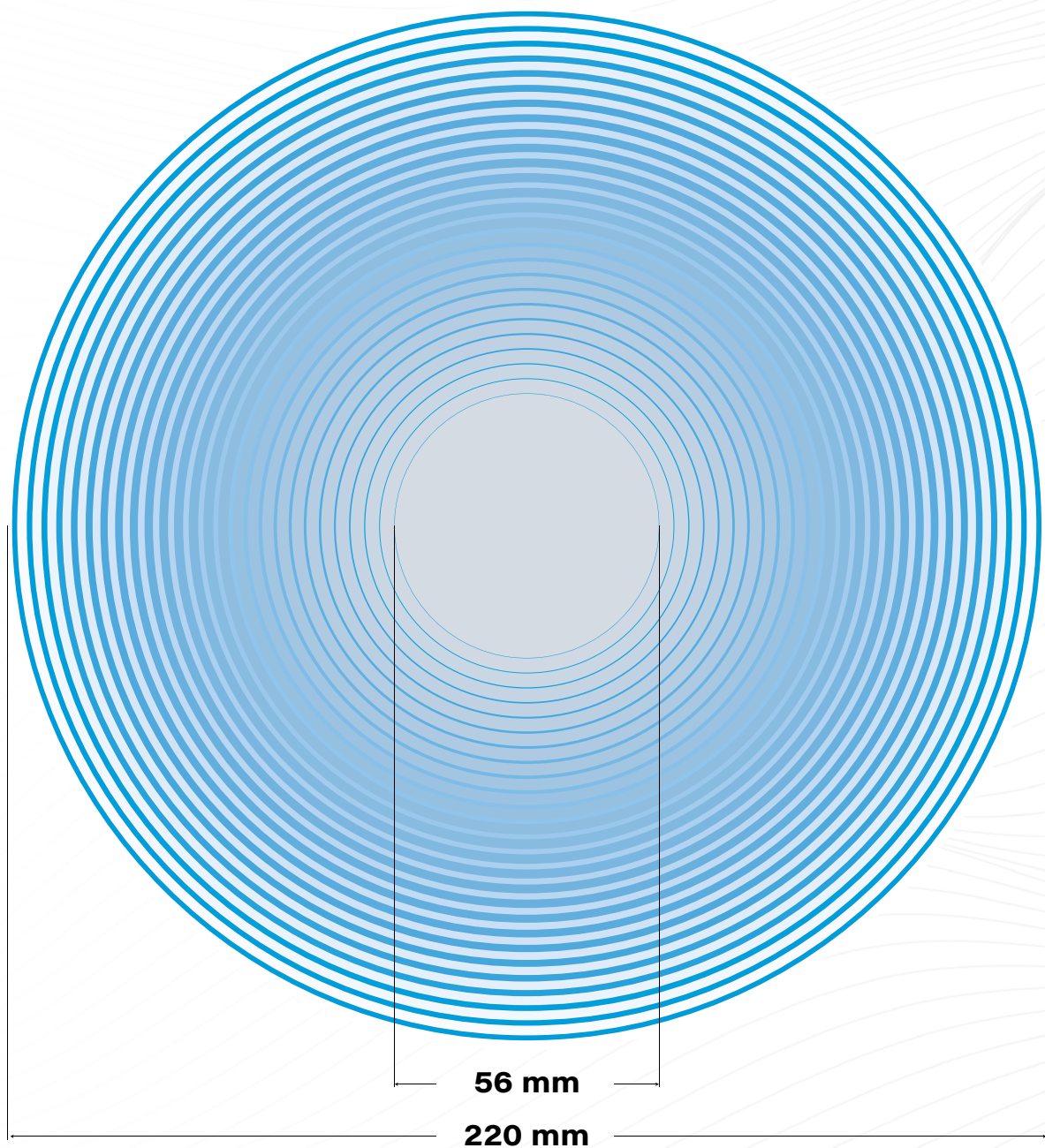

Leistungen

- ✓ sanftaftend und sehr saugfähig
- ✓ Minimierung von Wundmazeration
- ✓ atraumatischer Verbandwechsel
- ✓ hochgradig anpassungsfähig
- ✓ werkzeuglos anpassbar

Exsudatmenge (E)

kein /gering

mäßig



stark



sehr stark



Wundphase (P)

Nekrose



Fibrinbelag



Granulation



Epithelisierung



Infektion



Wundtiefe (W)

flach



tief



Kavität



LIQUEEMAX®

Intelligentes Design für flexible Anwendungsmöglichkeiten

LIQUEEMAX® ist indiziert für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B. traumatischen Wunden, postoperativen Wunden, chronischen Wunden, Druckgeschwüren, Tumorwunden oder Verbrennungen. Der superabsorbierende Silikonverband kann während des Applizierens wieder atraumatisch gelöst und bei Bedarf neu positioniert werden, ohne dass die Hafteigenschaften beeinträchtigt werden.

LIQUEEMAX® eignet sich besonders gut zur Versorgung planer, konvexer und konkaver Wundsituationen, beispielsweise an der Ferse, der weiblichen Brust, dem Ellenbogen, im Sakralbereich, am Knie oder der Schulter. Dank des patentierten Designs kann die Wundauflage schnell und werkzeuglos an die aktuelle anatomische Körperform angepasst werden, was die Behandlung deutlich erleichtert.



Leistungen

- ✓ sanftaftend und sehr saugfähig
- ✓ Minimierung von Wundmazeration
- ✓ atraumatischer Verbandwechsel
- ✓ hochgradig anpassungsfähig
- ✓ werkzeuglos anpassbar

Indikationen


- ✓ Traumatische Wunden
- ✓ Postoperative Wunden
- ✓ Chronische Wunden
- ✓ Venöse Ulzera
- ✓ Druckgeschwüre
- ✓ Diabetische Fußgeschwüre
- ✓ Tumorwunden
- ✓ Verbrennungen

Größe		Zusatzinformation	VE	PZN	REF
S	Ø 75 mm	Ø 56,5 mm bis 75 mm	1 x 10	5956358	LQM-75
M	Ø 150 mm	Ø 112,5 mm bis 150 mm	1 x 10	5956364	LQM-150
L	Ø 220 mm	Ø 165 mm bis 220 mm	1 x 10	5956370	LQM-220

LIQUEEMAX®

Beispielhafte Darstellung der Anwendungsmöglichkeiten

Die nachfolgenden Illustrationen zeigen beispielhaft die flexiblen Applikationsmöglichkeiten von LIQUEEMAX® und verdeutlichen die optimale Positionierung an planen, konkaven bzw. konvexen Körperstellen. Darüber hinaus ist LIQUEEMAX® auch an allen weiteren für chronische Wunden typischen Lokalisationen anwendbar.

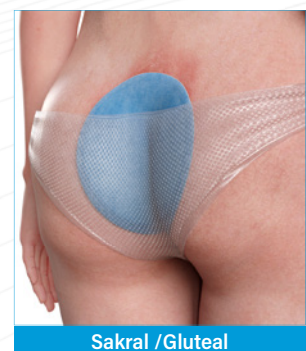

Vielseitig anwendbar bei externen Zugängen

LIQUEEMAX® eignet sich auch ideal in der Versorgung externer Zugänge, wie z. B. PEG-Sonden (perkutaner endoskopischer Gastrostomie), suprapubischen Blasenkathetern oder Wunddrainagen.

Logistikpartner Österreich
Publicare plus GmbH
An der Trauner Kreuzung 1
4061 Pasching
Telefon 07229 / 63 902
E-Mail info@publicare-plus.at



Vertrieb durch:
LF Medizinprodukte GmbH
Buchau 3
8933 Oberreith
Telefon 03632 / 61 690
E-Mail info@lf-med.at

